


SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK

INSTRUCTION MANUAL

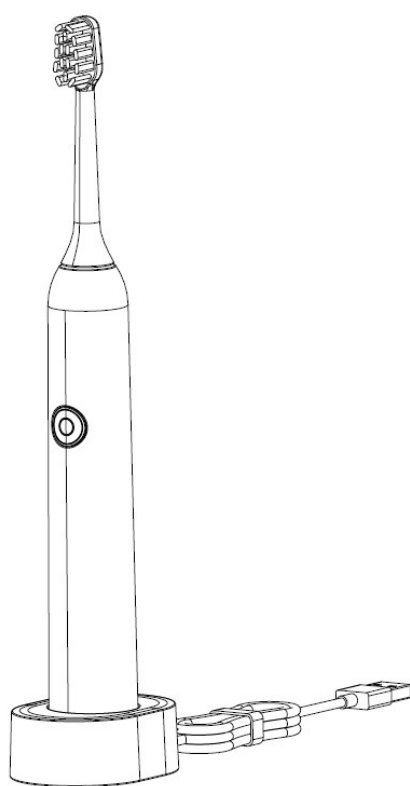

Model: GTS2010

Tuto příručku si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uchovejte ji pro budoucí použití

DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI


Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů:

Prostudujte všechny pokyny.

1. Ujistit se, že napětí zásuvky odpovídá napětí uvedenému na štítku.
2. Adaptér používaný pro tento spotřebič musí odpovídat specifikaci DC 5 V / $\geq 0,5$ A.
3. Spotřebič může být používán pouze s adaptérem se specifikací DC 5 V / $\geq 0,5$ A.
4. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, výrobek nedávejte, ani neskladujte na místech, kde hrozí riziko pádu do vany nebo umyvadla.
5. Na ochranu před požárem, úrazem elektrickým proudem a zraněním osob adaptér a nabíječku nepoužívejte v koupelně a šňůru, zástrčku, adaptér nebo nabíječku neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Adaptér a nabíječku neoplachujte vodou.
6. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je napájecí kabel poškozený, spotřebič řádně zlikvidujte.
7. Pokud nabíječku upustíte do vody, nesahejte pro ni. Nejprve odpojte přívod elektrické energie a poté ji vytáhněte z vody.
8. Nepoužívejte zařízení s poškozenou nabíječkou, kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše či poté, co spadlo do vody nebo bylo jinak poškozeno. Odnesete spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska na prohlídku, opravu nebo seřízení.
9. Při vypořádání nabíječky ze sítě zatáhněte za zástrčku, netahejte za šňůru. Nedotýkejte se zástrčky mokrou rukou.
10. Nabíječku nepoužívejte venku nebo v blízkosti teplých povrchů.
11. Dohlížejte na děti, když si čistí zuby, dokud si nevytvoří správné návyky.
12. Kartáček neponořujte do horké vody.
13. Zubní kartáčky mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby neznalé a nezkušené, pokud jsou pod dohledem dospělé osoby nebo byly touto osobou poučeny o bezpečném použití tohoto přístroje a rozumí rizikům spojeným s jeho používáním. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

14. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
15. Kartáčkem na zuby nebo dásně příliš netlačte. Ani kartáčkem dlouho nečistěte stejné místo, aby nedošlo k jeho poškození.
16. Před každým použitím se ujistěte, že kartáček nevykazuje žádné viditelné poškození. Poškozeným kartáčkem si zuby nečistěte.
17. O používání kartáčku se poraďte se svým lékařem, pokud jste v posledních dvou měsících prodělali zubní chirurgický zákrok nebo procházíte léčbou zubů.
18. Při prvním použití kartáčku se může objevit krvácení. Pokud toto krvácení trvá déle než jeden týden, poraďte se se svým zubním lékařem.
19. Osoby s kardiostimulátory nebo jinými implantovanými zdravotnickými prostředky musí použití kartáčku předem konzultovat s lékařem.
20. Na nabíječku nepokládejte žádné kovové předměty, aby nedošlo k vznícení.
21. Kartáček je určen pouze pro osobní použití a není určen k použití více osobami.
22. Kartáčkovou hlavici přestaňte používat, pokud má ohnuté nebo poškozené štětiny. Kartáčkovou hlavici vyměňte každé 3 měsíce, v případě opotřebení i dříve.
23. Tento zubní kartáček obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii. Nezahřívejte ho, nevhazujte do ohně, ani neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte v prostředích s vysokými teplotami, jinak může dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
24. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, zlikvidujte celý spotřebič.
25. Tento výrobek používejte pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem.
26. Kabel uchovávejte mimo ohřívané povrchy.
27. Nikdy jej nepoužívejte ve spánku nebo pokud jste ospalí.
28. Do otvorů spotřebiče nekládejte žádné předměty, ani žádné neupust'ete na kabel.
29. Nepoužívejte venku nebo tam, kde jsou používány aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se podává kyslík.
30. Dvojitá izolace – Při servisu používejte pouze identické náhradní díly.
31. Tyto pokyny si uložte.

SEZNAMTE SE S VAŠÍM SONICKÝM KARTÁČKEM

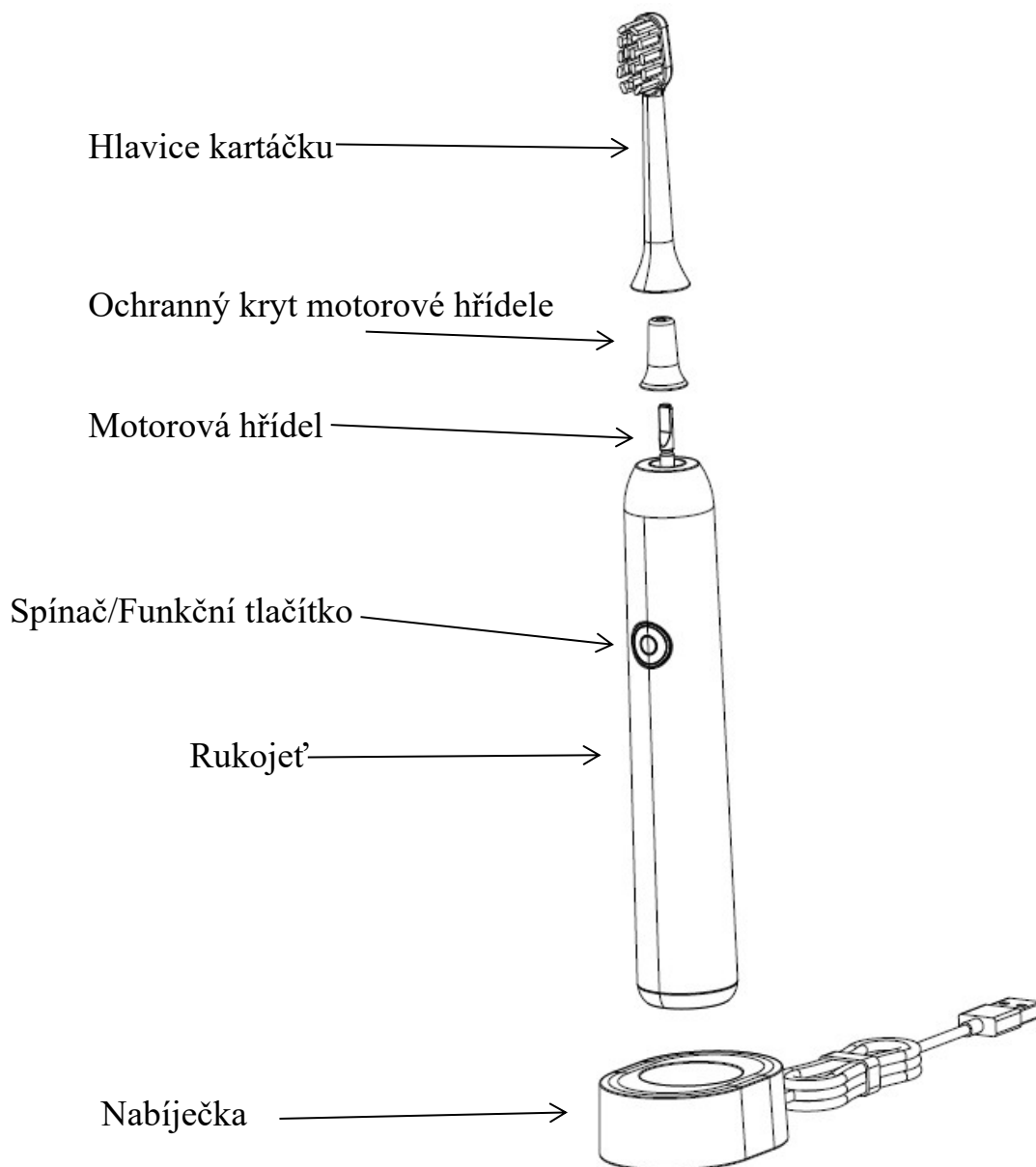

NABÍJENÍ SONICKÉHO KARTÁČKU

POZNÁMKA: Kartáček musí být před zahájením nabíjení vypnut.


POZOR: Zubní kartáček musí být nabíjen při určité teplotě okolí. Teploty, které jsou příliš nízké (jako např. pod 0 °) nebo teploty, které jsou příliš vysoké (např. nad 45 °C), mohou vážně poškodit baterii.

1. Nabíječku umístěte na rovný stabilní stůl nebo jiný povrch, poté zasuňte USB do zásuvky adaptéru a pak připojte adaptér ke zdroji napájení.

POZNÁMKA: Před nabíjením se přesvědčte, že používaný adaptér splňuje specifikace

DC 5 V / $\geq 0,5$ A.

2. Kartáček umístěte svisle do nabíječky a ujistěte se, že je jeho spodní část ve správné poloze na kolíku nabíječky (viz Obr. 1). Při nabíjení se bílé rozsvítí indikátor nabíjení a bude blikat. Když bude kartáček plně nabitý, změní se barva tohoto indikátoru na trvalou modrou.

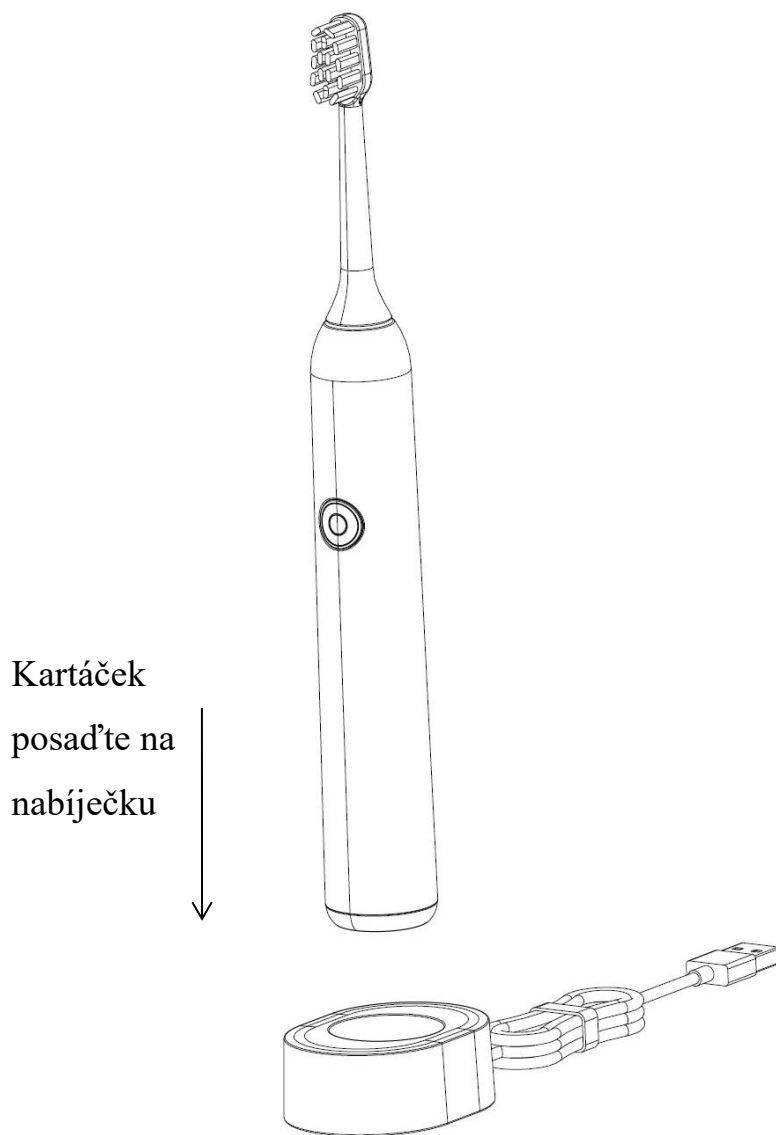


Obr. 1


POUŽÍVÁNÍ SONICKÉHO KARTÁČKU

1. Odstraňte ochranný kryt motorové hřídele a poté svisle zasuňte hlavici kartáčku dolů do hřídele motoru, přesvědčte se, že hlavice kartáčku dobře sedí na svém místě (viz Obr. 2, Obr. 3 a obr. 4).


Odstraňte
ochranný kryt
motorové
hřídele
směrem
nahoru

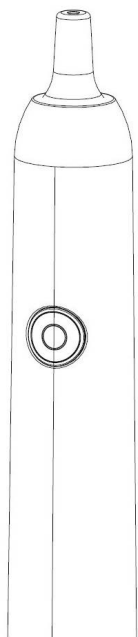

Obr. 2

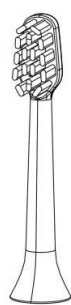

Hlavici
kartáčku dobře
zasuňte

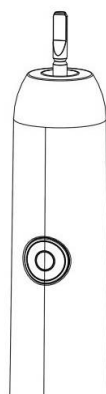


Obr. 3




Obr. 4

2. Opláchněte kartáčkovou hlavici vodou a poté na ní naneste zubní pastu (viz Obr. 5).

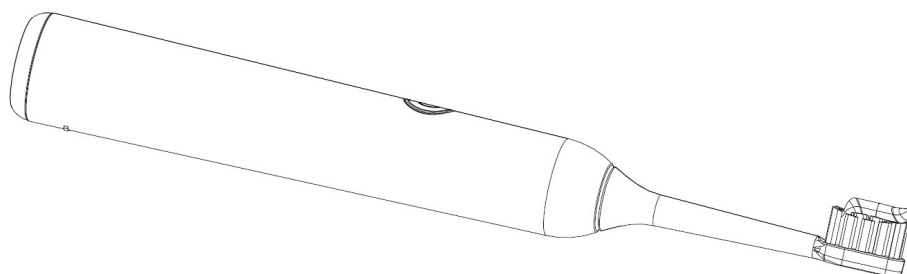

Obr. 5

3. Kartáčkovou hlavici vložte do úst a kartáček umístěte mezi zuby a dásně (viz Obr.6).

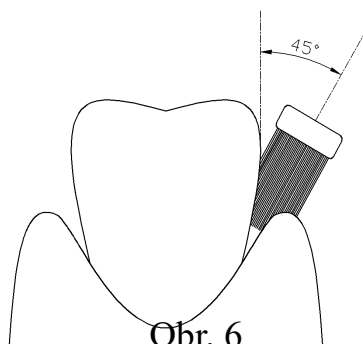

Obr. 6

4. Stiskněte tlačítko **spínač/funkční tlačítko** pro zapnutí kartáčku a můžete začít s čištěním zubů.

4.1 Můžete si vybrat z níže uvedených pracovních režimů kartáčku:

4.1.1 Jednou stiskněte **spínač/funkční tlačítko**, když je zubní kartáček vypnutý, kartáček se zapne a bude pracovat podle níže uvedeného popisu.

4.1.2 Pokud kartáček pracuje v režimu „**Čištění**“, za kterého světelný kruh svítí bíle, a doba použití je kratší než 5 sekund, stiskněte spínač/funkční tlačítko ještě jednou a zubní kartáček se přepne do režimu „**Citlivý**“ a světelný kruh bude svítit modře. Pokud doba použití překročí 5 sekund, stiskněte znovu **spínač/funkční tlačítko**, kartáček se vypne a bude uložen aktuální režim, což znamená, že kartáček bude pracovat v režimu „**Čištění**“, až bude příště aktivován.

4.1.3 Pokud kartáček pracuje v režimu „**Citlivý**“, za kterého světelný kruh svítí modře, a doba použití je kratší než 5 sekund, stiskněte **spínač/funkční tlačítko** ještě jednou, zubní kartáček se vypne a po dalším zapnutí bude pracovat v režimu „**Čištění**“. Pokud doba použití překročí 5 sekund, stiskněte znovu **spínač/funkční tlačítko**, kartáček se vypne a bude uložen aktuální režim, což znamená, že kartáček bude pracovat v režimu „**Citlivý**“, až bude příště aktivován.

4.1.4 Po zvolení požadovaného režimu nechte kartáček běžet po dobu 2 minut, poté se kartáček automaticky vypne a bude uložen aktuální pracovní režim. Po dalším zapnutí začne kartáček pracovat v tomto uloženém režimu.

4.2 Po zvolení požadovaného režimu se kartáček zhruba každých 30 sekund na krátkou chvíli zastaví, aby vás upozornil na změnu čištěné oblasti. Po nepřetržitém používání v délce 2 minut se kartáček sám vypne.

POZNÁMKA: V ústech jsou dvě řady zubů a každá řada má pravou a levou část, takže je nutné celkem vyčistit 4 části.

4.3 Kartáčkem pomalu pohybujte směrem dozadu a dopředu, abyste zuby vyčistili.

5. Po vyčištění zubů kartáčkovou hlavici opláchněte pod tekoucí vodou a osušte ji.

Rukojeť otřete ručníkem.

POZNÁMKA: Pokud světlo bliká bíle (v režimu „Čištění“) nebo modře (v režimu „Citlivý“) během celého provozu, znamená to, že kartáček potřebuje nabít.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním odpojte adaptér ze zdroje napájení a odpojte USB z adaptéru. Nabíječku nikdy neponořujte do vody.

Nabíječku, kartáčkovou hlavici a rukojeť otřete měkkým hadříkem, poté je dobře osušte.


Nikdy nepoužívejte jedovaté čisticí prostředky.

POZOR: K čištění vnější části kartáčku nepoužívejte chemické, kovové, dřevěné ani abrazivní čisticí prostředky.

Hlavu ani rukojeť kartáčku nemyjte v myčce na nádobí.

POZOR: Zubní kartáček musí být nabíjen při určité teplotě okolí. Teploty, které jsou příliš nízké (jako např. pod 0 °) nebo teploty, které jsou příliš vysoké (např. nad 45 °C), mohou vážně poškodit baterii.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

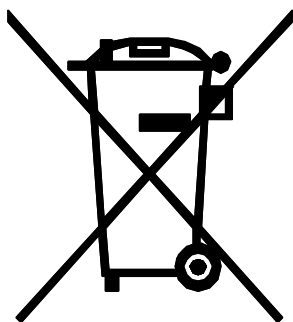

Můžete přispět k ochraně životního prostředí!
Dodržujte místní předpisy: nefunkční elektrická zařízení předejte k likvidaci příslušnému středisku pro likvidaci odpadu.

