

# Akumulátorová ústní sprcha

Model WT3700 — Před použitím výrobku si prosím tyto pokyny důkladně prostudujte. Manuál si uschovejte pro případ potřeby.



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující informace popisují správný a bezpečný způsob používání tohoto přístroje, jehož dodržováním předejdete jakémukoli možnému poranění či poškození přístroje.

## PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE TYTO POKYNY

### NEBEZPEČÍ


- Přístroj není určen pro děti kojeneckého věku a osoby nezpůsobilé k jeho používání. Udržujte mimo dosah dětí.
- Přístroj nijak neupravujte. Nepokoušejte se jej ani rozebrat či opravovat.
- Přístroj neponechávejte na místě, ze kterého by mohl spadnout či být shozen do vany nebo umyvadla.
- Přístroj nesmí zůstat dlouhou dobu ponořený ve vodě.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně.

## VAROVÁNÍ

- Přístroj nesmí zůstat dlouhou dobu ponořený ve vodě. Děti od věku 8 let a osoby se sníženými pohybovými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou ústní sprchy používat pouze pod dozorem.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Přístroj nabíjejte pouze pomocí zdroje napájení dodávaného společně s přístrojem.
- Před likvidací přístroje je nutné z něj nejdříve odstranit baterii.
- Během odstraňování baterie přístroj nesmí být připojen k elektrické zásuvce.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Do nádržky na vodu nenalévejte vodu s teplotou vyšší než 40 °C. Dojde-li k poškození adaptéru, zástrčky či kabelu, okamžitě jej přestaňte používat.
- Neponechávejte kabel na topení ani jiném horkém povrchu.
- Ztratíte-li trysku, přístroj prosím nepoužívejte.
- Neponechávejte přístroj dlouhodobě ponořený ve vodě.
- Přístroj používejte pouze pro čištění ústní dutiny a k žádnému jinému účelu.
- Udržujte trysku mimo dosah malých dětí. Tryska je dostatečně malá na to, aby ji dokázaly spolknout, mohla by jim tak uvíznout v krku.
- Některé typy ústní vody mohou mít na přístroj škodlivý vliv a způsobit popraskání krytu nebo nádržky na vodu. Proto prosím do nádržky ústní vodu nenalévejte.
- Pokud budete pociťovat bolest zubů či dásní a nebude pro Vás možné přístroj používat, obraťte se prosím na svého zubaře.
- Netiskněte trysku k zubům či dásním příliš silně.

## TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

### Diagram výrobku

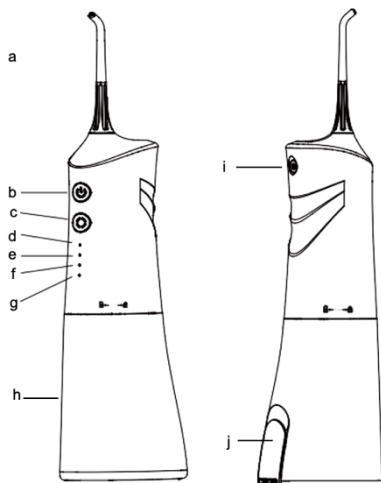


- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Tryska                    | f. Indikátor běžného režimu  |
| b. Vypínač                   | g. Indikátor režimu nabíjení |
| c. Indikátor režimu          | h. Nádržka na vodu           |
| d. Indikátor šetrného režimu | i. Nabíjecí stanice          |
| e. Indikátor pulzního režimu | j. Víko nádržky na vodu      |

### Poznámka:

Může se stát, že při prvním použití objevíte stopové množství kapaliny uvnitř nádrčky, nasávací trubičky či v jiné části přístroje. Jedná se o destilovanou vodu z kontrolní zkoušky průtoku, která je zdravotně zcela nezávadná.

## Postup nabíjení

Pro nabíjení lze použít následující typy zařízení (Obr. 1)

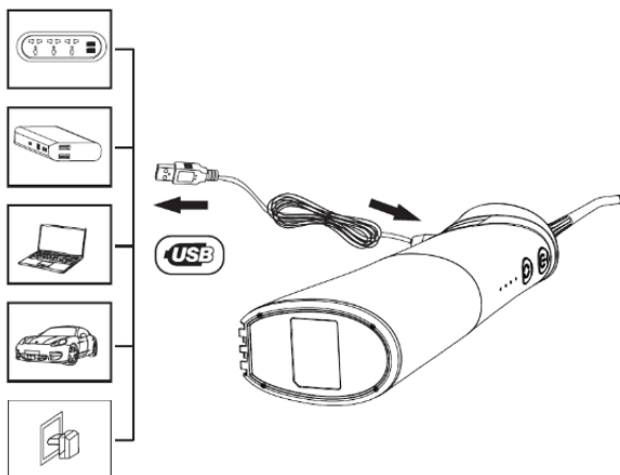

Obr.1


V průběhu nabíjení bude červená LED dioda opakovaně blikat. Po dokončení nabíjení začne červená LED dioda nepřerušovaně svítit po dobu 2 minut a poté zhasne.

### Poznámka:

Začne-li červené světlo indikátoru blikat během používání, ohlašuje tím nízký stav baterie. Pro další použití přístroje prosím dobijte baterii. Plné dobití baterie trvá 5,5 hodin. Ujistěte se, že nabíjecí zástrčka nezůstala mokrá, než ji zapojíte.


## Návod k použití

1. Otevřete víko nádrčky na vodu a naplňte ji vodou o teplotě maximálně 40 °C, poté víko zavřete. (Obr. 2)

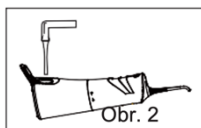


Obr. 2

2. Před prvním použitím prosím nalijte malé množství vody do vodní výpusti. (Obr. 3)

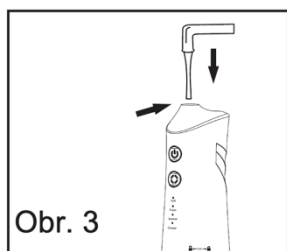


Obr. 3

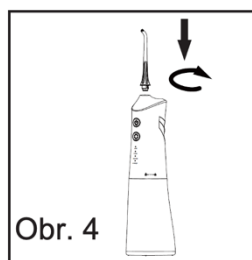


Obr. 4

3. Připevněte trysku k rukojeti a otočte o 45°. (Obr. 4)
4. Postup připojení nádrčky: Nasuňte rukojeť na nádrčku s vodou a zatlačte, dokud nezacvakne. (Obr. 5)

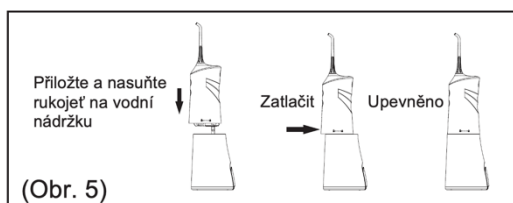

(Obr. 5)


5. Postup odpojení nádrčky: Zatlačte na rukojeť v opačném směru a uvolněte ji z nádrčky. (Obr. 6)

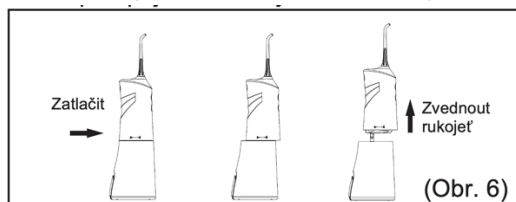


(Obr. 6)

## 6. Pokyny k obsluze (Obr. 7)


- Tato ústní sprcha má dva provozní režimy, běžný a manuální.
- Zatímco je přístroj vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu delší 2 vteřin. Tři indikátory režimů čištění naráz zablikají a poté zůstanou svítit, čímž signalizují úspěšné přepnutí.
- **Běžný provozní režim:** Zatímco je přístroj vypnutý, opakovaným stisknutím tlačítka režimu nastavte jemný, pulzní nebo silný režim čištění a poté stiskněte vypínač pro spuštění motoru. Opětovným stisknutím vypínače motor zastavíte (každý režim má 1minutový časovač).
- **Manuální provozní režim:** Zatímco je přístroj vypnutý, opakovaným stisknutím tlačítka režimu nastavte jemný, pulzní nebo silný režim čištění a poté stiskněte a podržte vypínač pro spuštění motoru. Jakmile tlačítko vypínače uvolníte, motor se zastaví (po 10 vteřinách nečinnosti se přístroj sám vypne).
- Nejdříve stiskněte tlačítko režimu pro výběr režimu čištění a poté stiskněte vypínač. Režim čištění lze přepnout i v průběhu čištění.
  - **Běžný:** Pro běžné čištění, první indikátor svítí bílou barvou.
  - **Šetrný:** Pro jemné čištění citlivých dásní, druhý indikátor svítí bílou barvou.
  - **Pulzní:** Pro čištění a masáž dásní, třetí indikátor svítí bílou barvou.

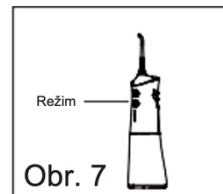

7. Udržujte hrot trysky nasměřovaný k zubům ve vertikální poloze.
8. Ústa mějte mírně otevřená, aby mohla voda vytékat ven.
9. Začněte s čištěním. (Obr. 8)
  - 1). Tryskající vodu směřujte k zubům a dásním pod úhlem 90 stupňů.
  - 2). Pomalu trysku navádějte kolem zubů.
  - 3). Tryskající vodu navádějte podél linie dásní s hrotem trysky pod úhlem 90 stupňů ke tkáni dásní.
  - 4). Důkladně očistěte místa mezi zuby a případně kolem rovnáték, korunek či můstků.

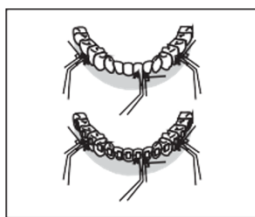

Obr. 8

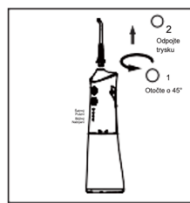

Obr. 9

### Po použití ústní sprchy

- Jakmile jste s čištěním hotovi, stiskněte tlačítko vypínače („On/Off“) a přístroj vypněte.
- Otočte tryskou o 45° v opačném směru a zdvihnutím ji odejměte. (Obr. 9)
- Otevřete víko nádrčky na vodu a zbývající vodu vylijte.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka vypínače a nechte odtéct veškerou zbývající vodu.
- Vypněte přístroj opětovným stisknutím tlačítka vypínače a zavřete víko nádrčky na vodu.
- Přístroj otřete suchým hadříkem.

### Poznámka:

Z důvodu prevence rozmnožování bakterií je nutné zajistit, aby v přístroji nezůstala žádná zbývající voda. Víte-li, že přístroj delší dobu nepoužijete, musíte jej před uskladněním důkladně otřít a vysušit.

### Údržba

Pro čištění přístroje používejte pouze vodu nebo neutrální čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte žíraviny nebo abrazivní prostředky (např.: ocet nebo odstraňovač vodního kamene), protože by mohly přístroj poškodit. Neomývejte horkou vodou s teplotou vyšší než 40 °C. Přístroj chraňte před vysokými teplotami a přímým slunečním světlem.

#### Hlavní jednotka

- Pro odstranění nečistot použijte tekuté mýdlo, poté ji otřete suchým hadříkem.
- Hlavní jednotku během čištění neponořujte do vody.
- Po omytí vodou ji vysušte.

#### Víko nádrčky na vodu

Případnou špínu a nečistoty setřete hadříkem.

#### Tryska

- Omyjte vodou a otřete jemným hadříkem.
- Každých 6 měsíců vyměňte trysku za novou.

#### Nasávací hadička

- Omyjte vodou a otřete jemným hadříkem.
- Hádčičku neohýbejte, neroztahujte a ani s ní nekrutíte.

#### Nádržka na vodu

- Omyjte vodou a otřete jemným hadříkem.
- Víte-li, že ji delší dobu nebudete používat, důkladně ji vysušte.

### Řešení obtíží

#### Problém

1. Přístroj nefunguje
2. Přístroj funguje jen pár minut, přestože byl nabit
3. Tlak vody je velmi slabý
4. Voda vůbec nevytéká

#### Možné příčiny

1. Výrobek jste si právě zakoupili, případně nebyl používán po dobu delší 3 měsíců.
2. Baterie dosáhla konce své životnosti.
3. Doba nabíjení byla příliš krátká.
4. Tryska je ucpaná nánosem nečistoty.
5. Tryska je zdeformovaná.
6. Filtr je ucpaný nánosem nečistoty.
7. Nádržka na vodu je prázdná.
8. Ústní sprchu během používání příliš nakláníte.
9. Ventilová deska je zdeformovaná.

#### Řešení

1. Nechte přístroj nabíjet po dobu minimálně 5,5 hodin
2. Požádejte servisní centrum o radu
3. Vyměňte trysku
4. Vyčistěte filtr
5. Naplňte nádržku vodou
6. Během použití držte přístroj ve vertikální poloze
7. Nalijte malé množství vody do vodní výpusti



Vyrobena v Číně